




認知症老人徘徊感知機器

認知症を持つ方の徘徊による危険を防ぐために、離床時や家屋の外に出ようとした時にセンサーによって感知し、介護者へ報知するために用います。

認知症老人徘徊感知機器とは？

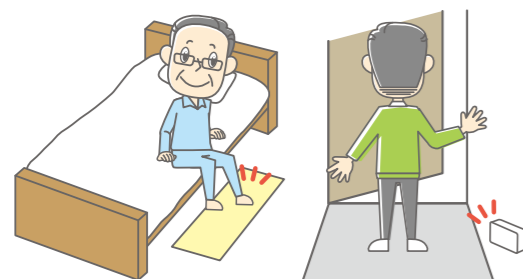

ベッドから離れたり
外に出ようすると
センサーが感知



離れている
介護者に
受信器が
音や光等で
お知らせ

離床センサー 家族コール2

[テクノスジャパン]

ベッドからの離床、移動等を検知し、無線で別室の介護者に知らせます

受信器は
選べる2種類!




据置タイプ
【Xロディチャイム10】

or





携帯タイプ
【ポケット受信器】

Aセット

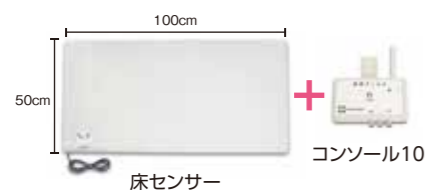

ベッドからの離床をお知らせ!

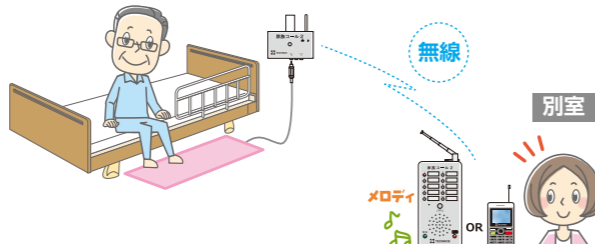
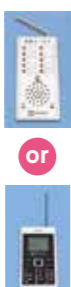


別室
■据置タイプ ■携帯タイプ
月額希望レンタル料 5,240円
ご利用者負担額(月額)
524円

Bセット



ベッドからの起き上がりをお知らせ!

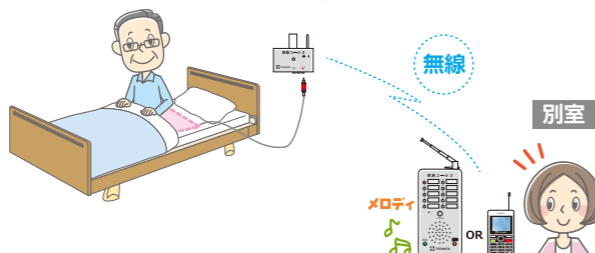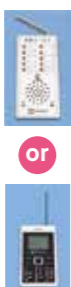


別室
■据置タイプ ■携帯タイプ
月額希望レンタル料 5,240円
ご利用者負担額(月額)
524円

Cセット



赤外線照射位置に入るとお知らせ!

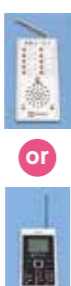

別室
■据置タイプ ■携帯タイプ
月額希望レンタル料 5,240円
ご利用者負担額(月額)
524円

1011-0012:HK2A(A/据置タイプ) 1011-0018:HKP2A(A/携帯タイプ) 1011-0013:HK2B(B/据置タイプ) 1011-0019:HKP2B(B/携帯タイプ) 1011-0021:HK2C(C/据置タイプ) 1011-0022:HKP2C(C/携帯タイプ)

※表記の「ご利用者負担額」は、1割負担の金額です。※ご利用者様の負担割合が変更となる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。

CAREai ライトシリーズ かんたんモデル

[ハカルプラス]



【ペンダント】
受信時の操作は簡単。
[対応]のボタンで音を止め、
「リセット」ボタンで消去するだけです。

【送信機】
分かりやすい
ボタンデザイン。

センサーと送信機の番号を
合わせるだけのかんたん設置



●商品構成:超音波センサー CI-LU1、送信機 CI-LT1、ペンダント CI-LP1


月額希望レンタル料 5,500円
ご利用者負担額(月額)

550円

1011-0020:CAREAI

ワイヤレス徘徊お知らせ お待ちくん 卓上型受信機セット

[竹中エンジニアリング]

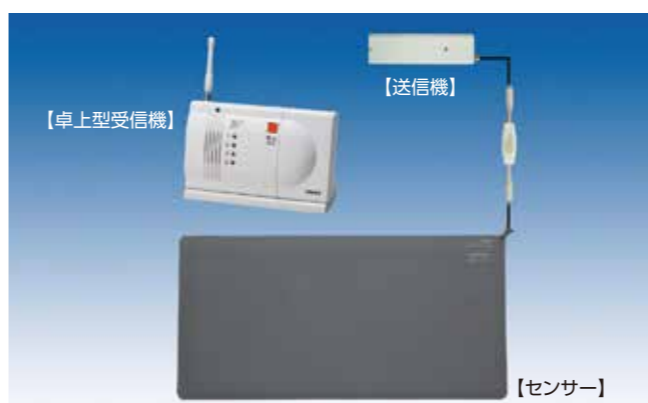


【卓上型受信機】

【送信機】

【センサー】

人の重さを検知し、光と音でお知らせ

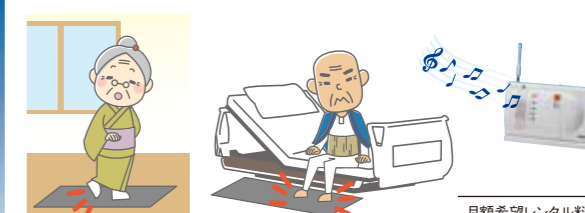

●商品構成:卓上型受信機1台、ジャック付送信機1台、センサー1台

※セットの卓上型受信機はパッシブセンサ送信機(TX-106)にも対応しています。

月額希望レンタル料 6,270円
ご利用者負担額(月額)

627円

1011-0006:HSWA48T

パッシブセンサ送信機・卓上型受信機

[竹中エンジニアリング]



【パッシブセンサ送信機】

【卓上型受信機】

人の動きを体温でキャッチし、
光と音でお知らせ



※パッシブセンサ送信機と卓上型受信機は、セットでお使いください。

■パッシブセンサ送信機
■卓上型受信機
月額希望レンタル料 3,140円
ご利用者負担額(月額)

314円

1011-0008:TX106(パッシブセンサ送信機) 1011-0007:HC350(卓上型受信機)

ケアロボコール2

[テクノスジャパン]



【ケアロボ2】

【マットスイッチ】

ベッドからの離床を報知


【ベッドセンサー】

ベッド上の起き上がりを報知

【赤外線センサー】

赤外線で離室・徘徊行動を報知

現在ご使用の携帯・スマホに
メールで報知

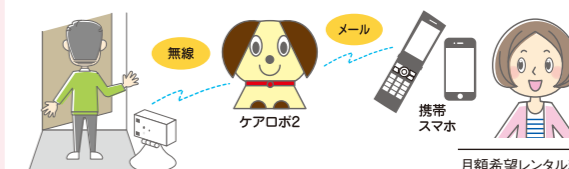

※別途通信料が必要です。(1ヵ月1,200円(税別)・介護保険適用外)

●商品構成:ケアロボ2本体1台、通信ユニット、センサー

月額希望レンタル料 14,300円
ご利用者負担額(月額)

1,430円

1011-0014:HKC2A(マットスイッチ) 1011-0015:HKC2B(ベッドセンサー) 1011-0016:HKC2C(赤外線センサー)

※表記の「ご利用者負担額」は、1割負担の金額です。※ご利用者様の負担割合が変更となる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。

見守る

見守る

移動する

排泄する

お風呂に入る

生活する

見守る

見守る

移動する

排泄する

お風呂に入る

生活する



生活する

見守る

移動する

排泄する

お風呂に入る

生活する

生活する

見守る

移動する

排泄する

お風呂に入る

生活する

バイオネクスト

[バイオシルバー]



マットレスの下に簡単設置
心拍・呼吸・体動を感知して、離床・徘徊を知らせます



- サイズ:(受信機・中継器)幅5.8×高さ11.5×奥行1.7cm
(センサーマット)幅80×高さ1~3×奥行14cm
(人感センサー)幅4×高さ4.3×奥行3.9cm
- 無線到達距離:100m(見通し)

月額希望レンタル料 6,600円
ご利用者負担額(月額)
660円

1011-0023-BSR031NHL

販売商品 ※介護保険適用外

[バイオシルバー]


aams.介護

独自の技術で開発した非接触・非拘束マット型センサー

aamsは、ベッドや布団から離れたところにおいても、呼吸、心拍、体の動き、ベッドにいるかないか、いつ離れたということを即時に知ることができるシステムです。

センサーマットの上に「寝るだけ」で、
心拍・呼吸・体動などをリアルタイムに感知します。


●商品構成:①センサーユニット ②センサーマット

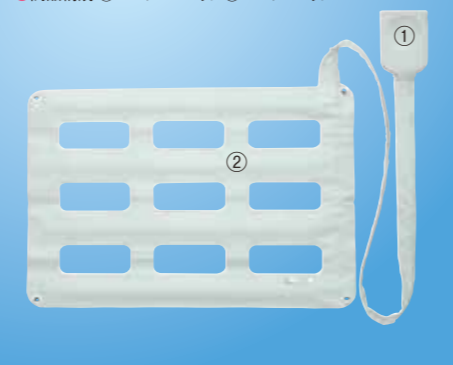

最先端技術 独自のセンサー、独自のアルゴリズムを搭載。

非接触・非拘束 マットや布団の下にセットするだけなので寝心地もよく、寝ている方は呼吸などを測られていることに気付きません。しかも消耗せず長持ちします。

自由なアラーム設定 心拍や呼吸がある一定数以上になった時、一定数以下になった時等のアラームの設定により、ご利用者の状況に合わせた見守りができます。そのほか離床、体動についても設定ができます。

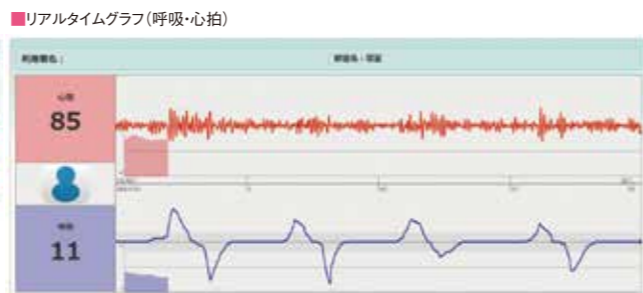

※ご利用にあたりましては、管理マスターサーバー・モニター(必須)ネットワーク機器(要現地調査)が必要になります。
※価格は別途お問い合わせください。※掲載画面はイメージ図です。

ワイヤレスチャイム 呼び出しセンサー

[昭和貿易]




離れた場所へ、
音と光でお知らせします!

- 商品構成:受信機1台、押しボタン送信機1台
(受信機)●電源:単3型乾電池×3本(別売)※別売ACアダプター有
(送信機)●電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)
- 電波到達距離:120m

希望小売価格(税別)
7,200円

高齢者 追跡・見守り 端末

enta おかえり
タッチサービス

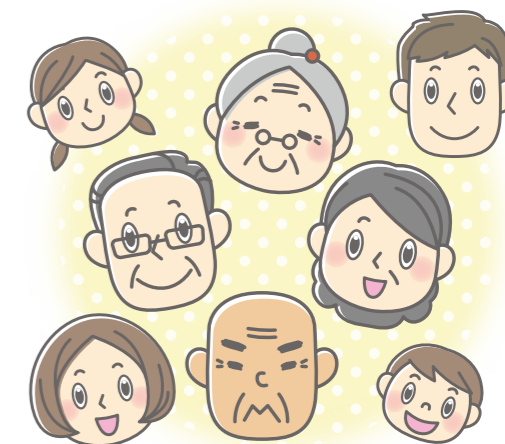

【端末本体】



本体は靴の中にも
入れることが
できます。

使用方法

- ①人、モノなどにGPS専用端末を装着します。
- ②現在地を知りたい時に、パソコンやスマートフォンで位置を検索します。
- ③地図URL付きメールが送信されます。



〈検索画面〉

各種機能の説明

位置情報検索

GPS端末を携帯された方の位置情報が検索できます。

- ・★マークの数で位置情報の精度がわかります。
- ・過去3ヶ月間の履歴検索ができます。



エリア通知機能

設定エリアからの出入りをメールでお知らせ。



・エリアは50m~最大99kmの範囲で設定可能。
(①エリアに入った時・②エリアを出た時・③出入り時)

振動感知機能

GPS機器が動くと加速度センサーが感知して、メールでお知らせ。

- ・専用シューズに装着することで、屋外に出られる際に感知し、通知します。



その他の機能

- メール通知先 最大5件まで登録可能。
- ステータス通知 電源ON・OFF時、電池残量30%~電池切れ時を設定可能
- タイマー設定 決まった曜日や時間で位置情報通知が可能
- ブザー鳴動機能 利用者画面より端末のブザーを鳴らすことが可能

仕様

- 充電時間:約120分間
- 連続待受時間:約400分間 ※使用環境や設定状況によって変動します。
- サイズ:幅3.85×奥行4.55×高さ1.185cm
- 重量:約30g

GPS専用
シューズ



うららかGPSウォーク
(ブラック)



うららかGPSウォークZ
(ブラウン)

※いずれも左足かかと部分にGPS機器が収納できます。
※片足販売可能。

サイズ(cm)	2S	S	M	L	2L	3L
	21.5~22.0	22.5~23.0	23.5~24.0	24.5~25.0	25.5~26.0	26.5~27.0

※価格等、詳しくは別途お問い合わせください。